


Revite® PLLA

INJECTABLE
POLY-L-LACTIC ACID
FILLER

فیلر تزریقی پلی-ال-لاکتیک اسید

VISPAR
تجهیزات پزشکی و زیبایی ویسپار

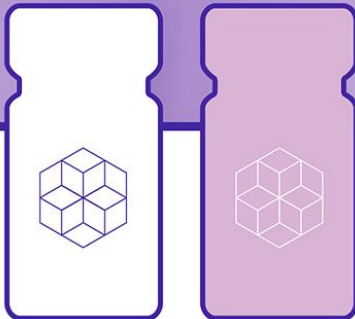

"ایده آل برای پزشکی که به دنبال
یک گزینه زیست محرک (Biostimulatory)
و با ماندگاری بالا در کنار ابزارهای هیالورونیک اسید (HA)
و کلسیم هیدروکسی آپاتیت (CaHA) هستند."

یک درمان زیست جذب پذیر و محرک کلاژن، طراحی شده برای بازسازی تدریجی حجم صورت و بهبود کیفیت پوست

محصول Revite® PLLA یک سوسپانسیون تزریقی استریل از میکروپارتنیکل های پلی-ال-لاکتیک اسید است که برای بازگرداندن حجم صورت از طریق مکانیسم زیست تحریکی کنترل شده فرموله شده است. هنگامی که این محصول در لایه درم عمیق یا بافت های زیرجلدی تزریق می شود، به عنوان یک داربست عمل کرده و طی چند هفته تا چند ماه موجب فیروپلازی و کلاژن سازی جدید (Neocollagenesis) می شود و در نهایت، بازسازی کانتورینگ تدریجی، با ماندگاری بالا و با حس بافتی کاملاً طبیعی ایجاد می نماید. شواهد بالینی برای کلاس PLLA نشان می دهد که در صورت استفاده از تکنیک مناسب، حجم دهی با ماندگاری بالا و میزان رضایت بالای بیماران حاصل می شود.

موارد مصرف: اصلاح لیپوآتروفی (تحلیل چربی) صورت و از دست رفتن حجم ناشی از افزایش سن، در مواردی که تحریک تدریجی کلاژن مورد نیاز است.



مزایای بالینی شاخص

تحریک کلاژن درون‌زا: برای بازسازی حجم به صورت تدریجی و با ظاهری کاملاً طبیعی

ماندگاری: اثرات طی چند هفته شکل گرفته و بسته به بیمار و رژیم درمانی، می‌تواند از چند ماه تا چند سال باقی بماند (طبق گزارش‌های بالینی کلاس PLLA)

حجم‌دهی کلی: مناسب برای حجم‌دهی کلی صورت، کانتورینگ گونه‌ها، شقیقه‌ها، خط فک و اصلاح نواقص کانتور در مواردی که ترمیم تدریجی ترجیح داده می‌شود

مکمل فیلرهای HA و CaHA: مکمل عالی برای فیلرهای هیالورونیک اسید و کلسیم هیدروکسی آپاتیت؛ به‌ویژه زمانی که اصلاح فوری و بازگشت‌پذیر، هدف بالینی نباشد.



مکانیسم اثر

میکروپار티کل‌های PLLA یک داربست سه‌بعدی ایجاد می‌کنند که باعث تحریک پاسخ بافتی موضعی و به دنبال آن فعال‌سازی فیبروبلاست‌ها و رسوب کلاژن می‌شود؛ این روند موجب ضخیم شدن تدریجی درم و بازسازی حجم می‌گردد.

راهنمای کاربردی درمان

آماده‌سازی (Preparation): پودر لیوفیلیزه PLLA را طبق دستورالعمل مصرف (IFU) بازسازی/آماده کنید.


پلن/عمق تزریق (Injection plane): درم عمیق، لایه زیرجلدی یا روی پریوست (روی استخوان) بسته به اندیکاسیون و ناحیه آناتومیک. از تزریق متوالی در حجم‌های کم استفاده کنید تا از ایجاد ندول (گره زیرپوستی) جلوگیری شود.

دوره درمان (Treatment course): معمولاً در یک دوره شامل 2 الی 4 جلسه با فاصله چند هفته از یکدیگر ارائه می‌شود؛ انتظار می‌رود بهبود بالینی تدریجی طی 6 تا 12 هفته پس از هر جلسه رخ دهد.



فرمولاسیون Revite® PLLA یک ترکیب استریل و لیوفیلیزه از پلی-ال-لاکتیک اسید است که به صورت سوسپانسیون تزریقی ارائه می‌شود. به عنوان یک محرک کلاژن، Revite® از کلاژن‌سازی جدید و بازسازی تدریجی ساختار صورت طی چند جلسه درمانی پشتیبانی می‌کند. پروتکل پزشک‌محور Revite® PLLA امکان بازسازی دقیق و تدریجی حجم را فراهم می‌کند و در عین حال، با کاهش حجم‌دهی فوری، احتمال اصلاح بیش‌ازحد در مراحل اولیه را کاهش می‌دهد. این محصول برای پزشکی طراحی شده است که به دنبال رویکردی ماندگار و طبیعی برای بازسازی ساختار صورت، فراتر از صرفاً افزایش حجم هستند.


- درجه پزشکی (Physician-grade): پلی-ال-لاکتیک اسید مخصوص پزشکان برای بازسازی تدریجی و طبیعی صورت
- سازگار با زیست (Biocompatible)، زیست‌جذب‌پذیر (Resorbable) و محرک کلاژن (Collagen-stimulating)
- طراحی‌شده برای ایجاد بهبودهای قابل پیش‌بینی و طولانی‌مدت، در شرایطی که هدف بالینی، حجم‌دهی تدریجی و ارتقای کیفیت بافت پوست باشد
- القای تدریجی کلاژن و بازسازی درم (Dermal remodelling)
- بهبود ماندگار کانتورینگ با برنامه‌ریزی درمانی مناسب

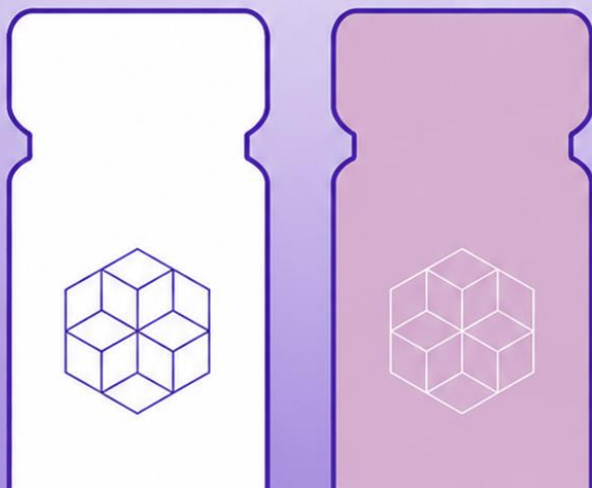

A

Revite®

POLY-L-LACTIC ACID
150mg

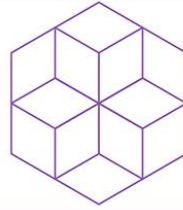

B

Revite®

Non-Crosslinked Hyaluronic Acid
Contains 0.3% Lidocaine
12mg/ml(5ml)



BioPlus Co.,Ltd.

MADE IN KOREA

VISPAR
تجهيزات پزشکی و زیبایی و پمپار